


## 3mach®- Medienverteiler

**Verwendungszweck:** Medienverteiler für den Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach®-Medienverteiler können mit einem Filterzylinder, einem Halterungsblock und/oder einer Einhängvorrichtung der Firma 3mach® verbunden sein. 3mach®-Medienverteiler sind modular aufgebaut und können über Adapterschienen an die zu reinigenden Hohlrauminstrumenten adaptiert werden und ermöglichen das 3mach OhneUmpack®-System. Der 3mach®-Spül- und Filterzylinder besteht aus zwei Teilen und kann eine, zwei oder drei Filterscheiben enthalten. Die Filterscheiben sind trennbar und mehrfach verwendbar. Filterscheiben müssen regelmäßig gereinigt werden (s. 3mach-Filterreinigung).

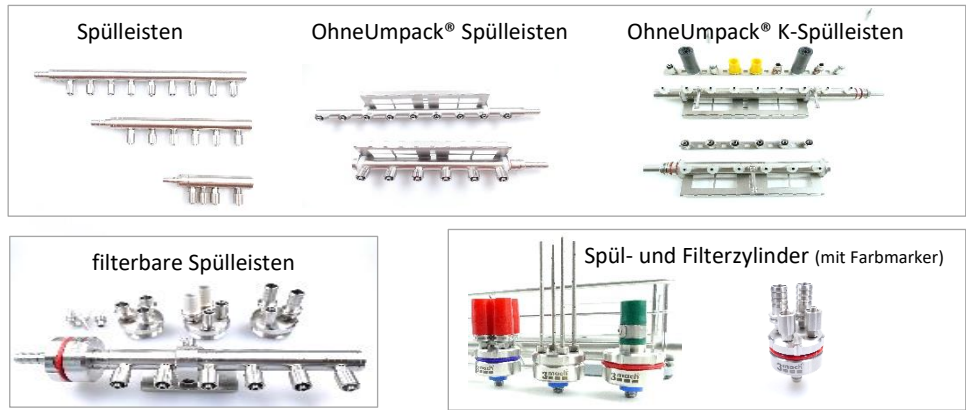

**Achtung:** Alle 3mach®-Medienverteiler müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden. Medienverteiler dürfen nicht an Menschen angewendet werden. Die Instrumente zum Durchspülen müssen an Medienverteiler sicher angeschlossen und für das Spülmedium durchgängig sein. Nicht genutzte Adapter sollten verschlossen werden, um Druckverlust zu reduzieren. Werden die vorgesehenen Einhängvorrichtungen an den Medienverteilern zu oft gebogen, so kann die Biegekante ein- und abreißen. Die Reinigungshinweise der Instrumentenhersteller sind bei der Nutzung der Medienverteiler zu beachten.

**Aufbereitung:** Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C). Für weiterführende Gebrauchshinweise bzw. Nutzungsarten wenden Sie sich bitte per E-Mail an [info@3mach.de](mailto:info@3mach.de).

**Haftung:** Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach®-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach®-Produkte und deren Zweckentfremdung.


**Hersteller:** Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany  
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, [www.3mach.de](http://www.3mach.de)



## 3mach® manifolds of flushing supply

**Use:** Manifolds of flushing supply in the area of instrument preparation.

3mach®-manifolds of flushing supply can be connected to a filter cylinder, a mounting block and/or a suspension device from 3mach company. 3mach®-manifolds of flushing supply are modular in design and can be adapted to the cavity instruments to be cleaned using adapter rails and enables the 3mach OhneUmpack®-System. The 3mach® flushing and filter cylinder consists of two parts and may contain one, two or three filter discs. The filter discs can be separated and used multiple times. Filter discs must be cleaned regularly (see 3mach® filter cleaning).

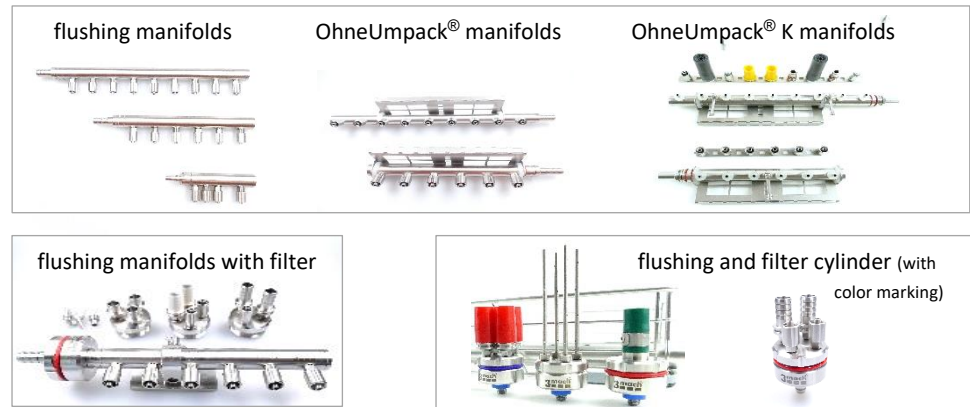

**Caution:** All 3mach® manifolds of flushing supply must be cleaned prior to initial use. Never use flushing manifolds on people. The flushing instruments must be securely connected to the manifolds and be able to pass the flushing supply through them. Unused adapters should be sealed to reduce pressure loss. If the designated mounting parts on the manifolds are bent too often, the bending edge may tear in and break off. The cleaning instructions from the instrument manufacturer must be observed when using the manifolds of flushing supply.

**Preparation:** Suitable for alkaline cleaning processes in the area of mechanical cleaning, thermal disinfection and drying (up to 120 °C). For further instructions for use or types of use, please contact us by email at [info@3mach.de](mailto:info@3mach.de).

**Liability:** 3mach GmbH bears no liability for injury or damage resulting from the use of 3mach® products. This also applies to individually converted and modified 3mach® products and their misuse.

**Manufacturer:** Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany  
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, [www.3mach.de](http://www.3mach.de)

